

ДАШБОРД ЗДОРОВ'Я · OURA RING

Тіло як *текст*


Власний дашборд для кільця Oura, який читає твої дані й пояснює, що з ними робити. Усе лишається на твоєму комп'ютері.

Безкоштовно · інструкція на 15 хвилин · тільки для Mac

Застосунок Oura показує цифри. Цей дашборд пояснює, *що вони значать*.

Я зібрала його собі, бо рідний застосунок дає готовність 72 і на цьому зупиняється, а мені хотілося бачити, через що саме вона 72 і що з цим робити на тижні.

Дашборд рахує твої власні кореляції: як недосип тягне вниз готовність, як стрес б'є по HRV, у який день тижня ти стабільно провалюєшся. Раз на тиждень він складає з цього план і пише його людською мовою.

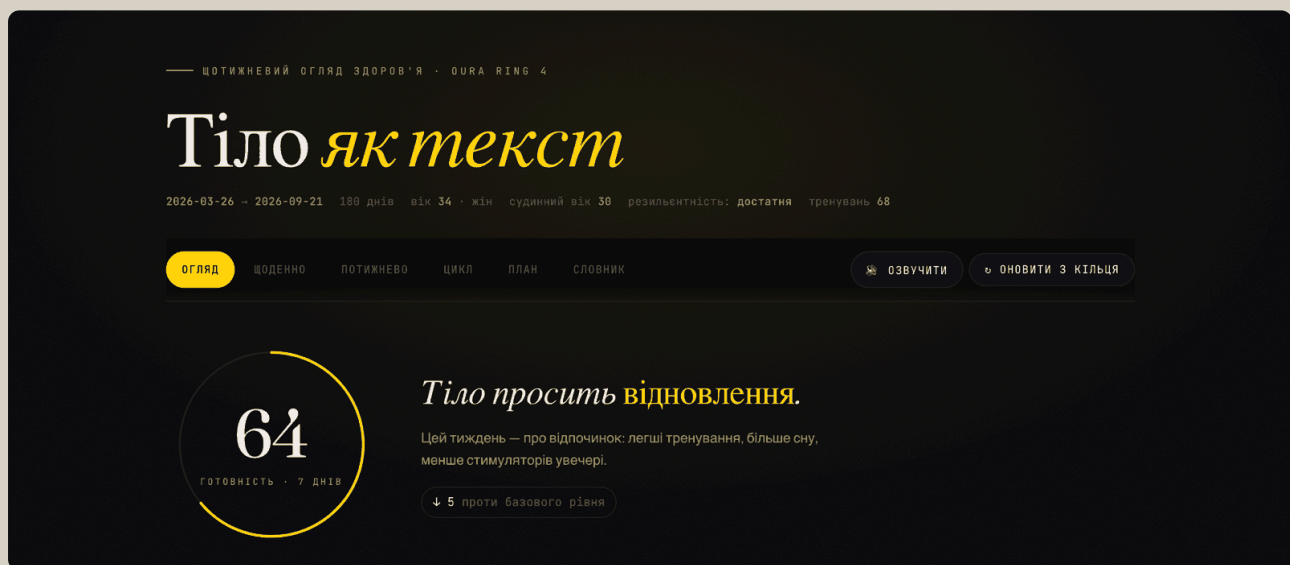


ВКЛАДКА «ОГЛЯД» · ДАНІ НА ЗНІМКУ ВИГАДАНІ

Шість вкладок


Огляд - головні показники тижня проти твого базового рівня. **Щоденно** - кожен показник за день із поясненням, що він означає. **Потижнево** - тренди, щоб бачити форму за місяці.

Цикл - фази, температурна крива, метрики по фазах і прогноз наступних місячних. **План** - що робити наступного тижня, на твоїх даних. **Словник** - усі терміни простими словами, щоб не гуглити.


Будь-яку вкладку можна послухати живим українським голосом. Безкоштовно, без жодних ключів.

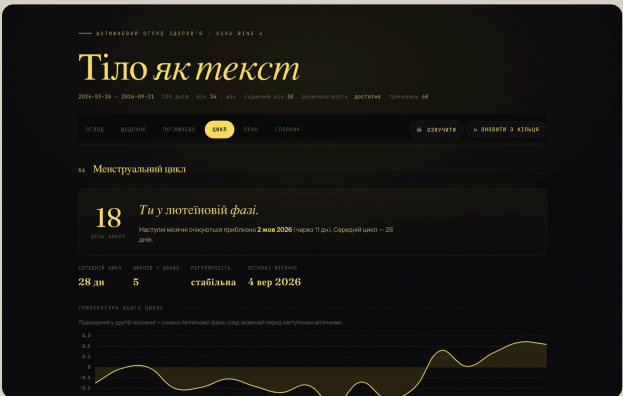


ЦИКЛ

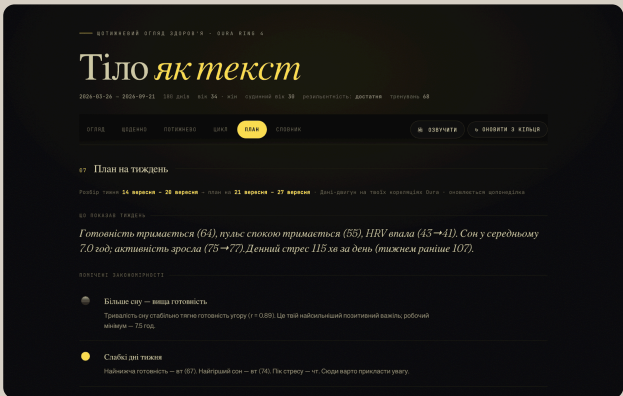

ПЛАН НА ТИЖДЕНЬ

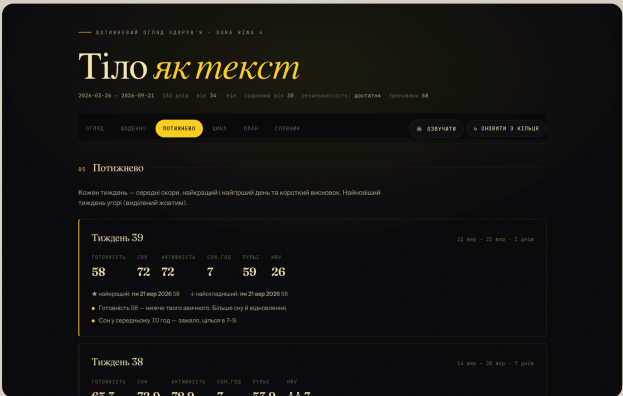

ПОТИЖНЕВО

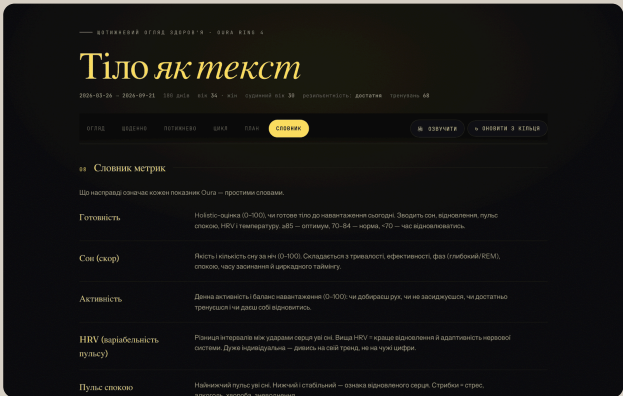

СЛОВНИК

Найпростіше - *одна фраза*

Claude Code - це помічник, який виконує команди на комп'ютері замість тебе. Ти кажеш словами, що треба, а він робить.

1. Постав Claude Code

Завантаж застосунок Claude з claude.ai/download, увійди у свій акаунт і відкрий вкладку **Code**.

2. Встав туди цю фразу

Постав мені дашборд для кільця Oura Ring.

1. Склонуй репозиторій
`https://github.com/hlyboki-sensy/oura-health-dashboard`
у мою домашню теку (якщо git недоступний – просто
скачай архів і розпакуй).
2. Зайди в теку проєкту, прочитай файл `CLAUDE.md`
і виконай усе, що там написано.

Я не програміст. Пояснюй простими словами, роби
по одному кроку і чекай на мою відповідь після кожного.

3. Далі просто відповідай на його запитання

Він перевірить систему, поставить що треба, покаже, де взяти ключі, і відкриє готовий дашборд у браузері.


Спершу можна попросити показати **демо на вигаданих даних** - подивишся, як усе виглядає, ще не заводячи жодних ключів.

Два ключі в акаунті Oura

Щоб програма могла прочитати дані твого кільця, Oura має видати тобі два власні ключі. Це безкоштовно і займає дві хвилини.

1. Відкрий **developer.ouraring.com/applications** і увійди своїм звичайним акаунтом Oura.
2. Натисни **Create New Application**.
3. Назву дай будь-яку, наприклад **My Dashboard**.
4. У полі **Redirect URI** встав рівно це:
`http://localhost:8765/callback`
5. Постав усі галочки в переліку дозволів.
6. Збережи. З'являться **Client ID** і **Client Secret**.

Ці ключі нікому не надсилай, навіть помічникові в чат. Ти вставляєш їх у файл на своєму комп'ютері, і далі вони нікуди не їдуть.

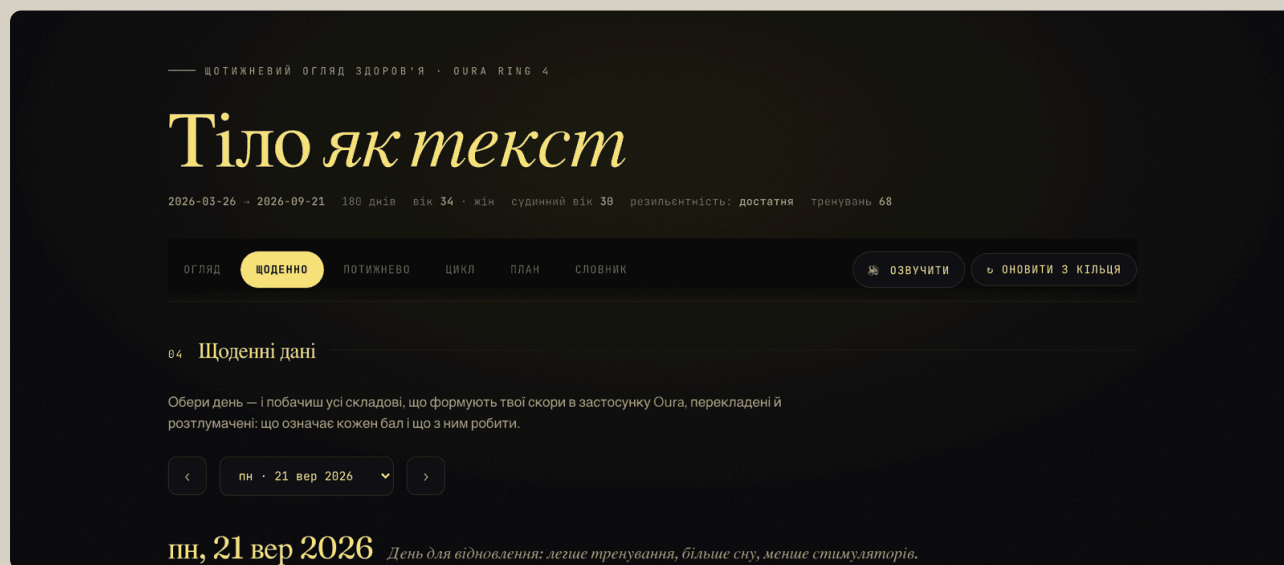

ВКЛАДКА «ЩОДЕННО» · ОСЬ ЩО БУДЕ, КОЛИ КЛЮЧІ НА МІСЦІ

Якщо звикла *руками*

Скачай проєкт із GitHub кнопкою **Code** → **Download ZIP**, розпакуй, відкрий Термінал у теці проєкту й виконай по черзі:

```
python3 -m pip install --user requests edge-tts

# подивитися демо на вигаданих даних
python3 make_demo_data.py
python3 build_dashboard.py && python3 serve.py

# свої справжні дані: спершу ключі у config.json
cp config.example.json config.json
open config.json
python3 oura_export.py
python3 build_dashboard.py && python3 serve.py
```

Дашборд відкриється за адресою 127.0.0.1:8910. Наступного разу достатньо двічі клікнути файл **start.command** у теці проєкту.

Приватність

Дашборд працює на твоєму комп'ютері, дані лежать у теці поруч із проєктом. Назовні йде лише запит до самої Oura по твої ж показники. Локальний сервер доступний тільки тобі й не видний із мережі.

І одразу чесно

Це інформаційний інструмент із твоїх власних даних, а діагнози ставить лікар. Працює тільки на Mac. Windows поки не підтримується.

ЗАБИРАЙ

github.com/
hlyboki-sensy/
oura-health-dashboard

Безкоштовно, з відкритим кодом, ліцензія MIT. Питання
й поламки пиши мені - це поки що маленьке коло, і мені
важливо почути, де саме буде незрозуміло.